



WithEase

Benutzerhandbuch

Modulare Assistenzsoftware für Menschen mit motorischen
Einschränkungen

Windows & Linux · kostenlos und quelloffen (MIT)

Version 0.2.1

Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie WithEase installieren,
einrichten und im Alltag nutzen.

Inhalt

Disclaimer

1. Was ist WithEase?
2. Installation
3. Erste Schritte
4. Allgemeine Einstellungen
5. Der Notfall-Stop
6. Maus-Modul
7. Tastatur-Modul
8. Makros
9. Profile
10. Aktionen & Favoriten-Overlay
11. Modul-Bibliothek
12. Über, Feedback & Teilen
13. Tipps & Problemlösung
14. Hilfe & Kontakt

Disclaimer

Ein offenes Wort vorweg: Ich bin kein ausgebildeter Software-Entwickler, sondern jemand mit Interesse am Programmieren – und mit Ideen, von denen ich überzeugt bin, dass sie anderen helfen können.

WithEase ist mit „**Vibe-Coding**“ entstanden, also mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Dazu stehe ich offen. Aus meiner Sicht ist das kein Grund, sich zu schämen, sondern heute durchaus normal. Ohne diese Möglichkeit wären die Gedanken in meinem Kopf nie Wirklichkeit geworden – jedenfalls nicht in einem Umfang, der es mir erlaubt, das Programm nun kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Genau deshalb ist mir Ihre Rückmeldung wichtig: Sie hilft, WithEase Schritt für Schritt besser zu machen.

1. Was ist WithEase?

WithEase ist ein kleines Hilfsprogramm, das Menschen mit eingeschränkter Feinmotorik die Bedienung von **Maus und Tastatur** erleichtert. Es läuft unauffällig im Hintergrund (im System-Tray, unten rechts neben der Uhr) und greift nur dort ein, wo Sie es wünschen.

Jede Funktion ist ein eigenes **Modul** und lässt sich einzeln ein- und ausschalten. So bleibt das Programm übersichtlich und tut genau das, was Sie brauchen – nicht mehr.

Das kann WithEase:

- **Maus:** Cursor automatisch zentrieren, Präzisionsmodus, Click-Lock, Tasten als Maustasten, Bildschirmbereiche anspringen, Cursor hervorheben
- **Tastatur:** Mehrfachanschläge unterdrücken (Tastenverzögerung), Sticky Keys mit Statusanzeige
- **Makros:** Textbausteine, Tastenkombinationen, Programme starten
- **Profile:** mehrere Einstellungssätze, z. B. Arbeit / Zuhause / Gast
- **Notfall-Stop:** eine Taste schaltet alles sofort ab

Gut zu wissen

WithEase ist kostenlos, benötigt kein Benutzerkonto, zeigt keine Werbung und sendet Ihre Eingaben nirgendwohin. Alle Einstellungen bleiben auf Ihrem PC.

2. Installation

Windows

Es ist keine Installation nötig – einfach entpacken und starten:

- Öffnen Sie die **Releases**-Seite von WithEase auf GitHub.
- Laden Sie die Datei **WithEase-<Version>-win64.zip** herunter.
- Rechtsklick auf die ZIP-Datei → **Alle extrahieren ...**
- Öffnen Sie den entpackten Ordner **WithEase** und starten Sie **WithEase.exe** per Doppelklick.

Windows-Warnung „Der Computer wurde durch Windows geschützt“

Diese Meldung erscheint, weil das Programm nicht kostenpflichtig signiert ist – nicht, weil etwas damit nicht stimmt. Klicken Sie auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**. Tipp: Wenn Sie die ZIP-Datei vor dem Entpacken per Rechtsklick → *Eigenschaften* → **Zulassen** freigeben, erscheint die Warnung gar nicht erst.

WithEase startet danach im System-Tray. Es werden keine Administratorrechte benötigt. Ihre Einstellungen liegen unter %APPDATA%\WithEase.


Linux (Beta)

Laden Sie **WithEase-<Version>-linux64.tar.gz** herunter, entpacken Sie es mit `tar -xzf ...` und starten Sie `./WithEase/WithEase`. Verwenden Sie möglichst eine **X11/Xorg**-Sitzung – unter Wayland sperrt das System die globale Tastaturerkennung, dann funktionieren einige Funktionen nicht.

3. Erste Schritte

Nach dem Start finden Sie das WithEase-Symbol im **System-Tray** (unten rechts, ggf. hinter dem kleinen Pfeil „^“).

- **Doppelklick** auf das Symbol → Einstellungen öffnen
- **Einfacher Klick** → Menü (Profil wechseln, Pause, Beenden)

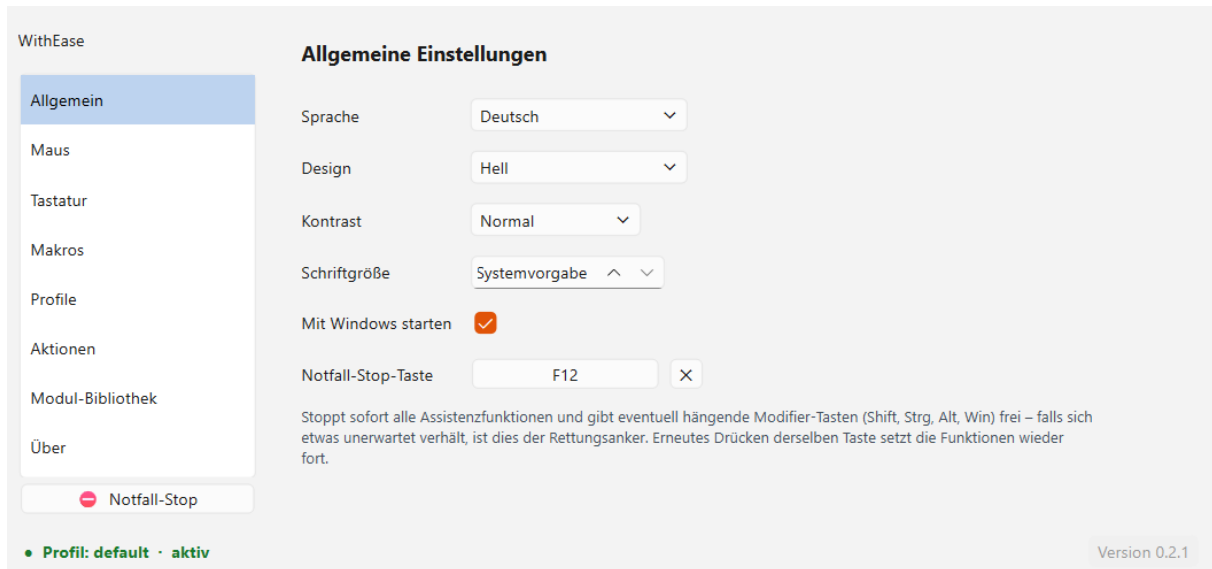

Das Einstellungsfenster von WithEase

So ist das Fenster aufgebaut:

- **Links die Navigation:** Allgemein, Maus, Tastatur, Makros, Profile, Aktionen, Modul-Bibliothek, Über
- **Rechts der Inhalt** der gewählten Seite
- **Unten links der Notfall-Stop** – schaltet alle Hilfen sofort ab
- **Ganz unten die Statuszeile** mit aktivem Profil und Version

Änderungen werden sofort gespeichert

Sie müssen nichts bestätigen – jede Änderung wird automatisch im aktiven Profil gesichert.

4. Allgemeine Einstellungen

Hier stellen Sie ein, wie WithEase aussieht und startet.

- **Sprache:** Deutsch oder Englisch
- **Design:** Hell, Dunkel oder Systemvorgabe
- **Kontrast:** *Hoher Kontrast* für bessere Lesbarkeit
- **Schriftgröße:** vergrößert die gesamte Oberfläche (8–16 pt) – hilfreich, wenn kleine Schrift schwerfällt
- **Mit Windows starten:** WithEase startet automatisch bei der Anmeldung
- **Notfall-Stop-Taste:** die Rettungstaste (siehe nächstes Kapitel)

Empfehlung

Weisen Sie unbedingt eine **Notfall-Stop-Taste** zu (z. B. F12). Ohne sie bleibt Ihnen im Notfall nur das Tray-Menü.

5. Der Notfall-Stop


Der Notfall-Stop ist Ihr **Rettungsanker**. Ein Druck auf die zugewiesene Taste (oder ein Klick auf den roten Knopf unten links):

- schaltet **alle Assistenzfunktionen sofort ab**,
- gibt eventuell **hängende Tasten** (Umschalt, Strg, Alt, Win) wieder frei.

Ein erneuter Druck auf dieselbe Taste schaltet alles wieder ein. Nutzen Sie ihn immer dann, wenn sich die Tastatur oder die Maus unerwartet verhält.

6. Maus-Modul

Setzen Sie oben das Häkchen bei **Mausmodul aktivieren**. Danach können Sie jede Funktion einzeln einschalten – erst dann klappen ihre Einstellungen auf.

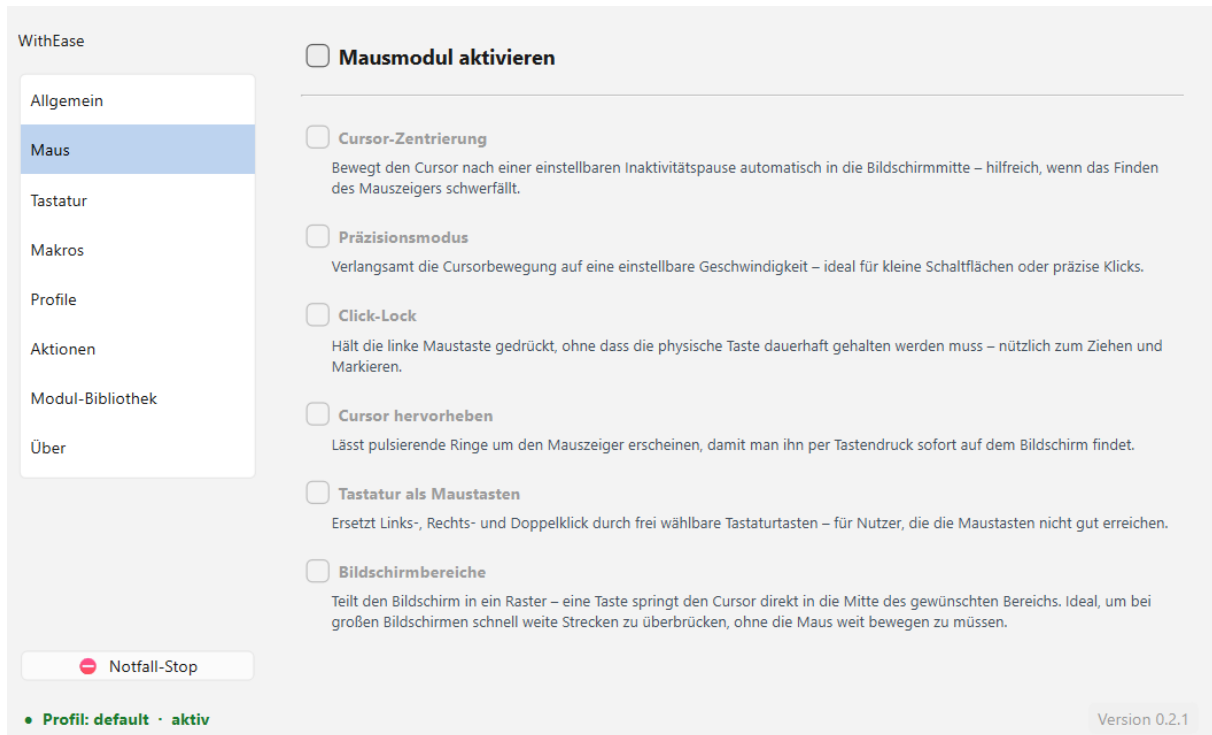

Alle Maus-Funktionen im Überblick

Die Funktionen im Einzelnen

- **Cursor-Zentrierung:** Nach einer einstellbaren Pause ohne Eingabe springt der Mauszeiger in die Bildschirmmitte – so finden Sie ihn immer wieder.
- **Präzisionsmodus:** Verlangsamt den Zeiger auf Tastendruck – ideal für kleine Schaltflächen.
- **Click-Lock:** Hält die linke Maustaste gedrückt, ohne dass Sie sie halten müssen – zum Ziehen und Markieren.
- **Cursor hervorheben:** Pulsierende Ringe um den Zeiger, damit Sie ihn sofort sehen.
- **Tastatur als Maustasten:** Links-, Rechts- und Doppelklick über frei wählbare Tasten.
- **Bildschirmbereiche:** Eine Taste springt den Zeiger direkt in einen Bildschirmbereich – spart weite Wege.

Beispiel: Cursor-Zentrierung einrichten

Aktivieren Sie **Mausmodul** und dann **Cursor-Zentrierung**. Es klappen die Einstellungen auf:

The screenshot shows the 'WithEase' settings application. On the left is a sidebar menu with options: Allgemein, Maus (selected), Tastatur, Makros, Profile, Aktionen, Modul-Bibliothek, and Über. The main area is titled 'Mausmodul aktivieren' and contains several settings:


- Cursor-Zentrierung** (checked): Description: 'Bewegt den Cursor nach einer einstellbaren Inaktivitätspause automatisch in die Bildschirmmitte – hilfreich, wenn das Finden des Mauszeigers schwerfällt.' Settings: 'Wartezeit vor Zentrierung (Sekunden)' set to 5 s, 'Countdown-Dauer (Sekunden)' set to 3 s, 'Taste zum manuellen Zentrieren' set to '— nicht belegt —', and 'Symbol am Mauszeiger anzeigen' (checked).
- Präzisionsmodus** (unchecked): Description: 'Verlangsamt die Cursorbewegung auf eine einstellbare Geschwindigkeit – ideal für kleine Schaltflächen oder präzise Klicks.'
- Click-Lock** (unchecked): Description: 'Hält die linke Maustaste gedrückt, ohne dass die physische Taste dauerhaft gehalten werden muss – nützlich zum Ziehen und Markieren.'
- Cursor hervorheben** (unchecked): Description: 'Lässt pulsierende Ringe um den Mauszeiger erscheinen, damit man ihn per Tastendruck sofort auf dem Bildschirm findet.'
- Tastatur als Maustasten** (unchecked): Description: 'Ersetzt Links-, Rechts- und Doppelklick durch frei wählbare Tastaturtasten – für Nutzer, die die Maustasten nicht gut erreichen.'
- Bildschirmbereiche** (unchecked): Description: 'Teilt den Bildschirm in ein Raster – eine Taste springt den Cursor direkt in die Mitte des gewünschten Bereichs. Ideal, um bei großen Bildschirmen schnell weite Strecken zu überbrücken, ohne die Maus weit bewegen zu müssen.'

At the bottom left is a 'Notfall-Stop' button with a red minus icon. At the bottom right, it says 'Version 0.2.1'. At the bottom left of the main area, it says '• Profil: default • aktiv'.

Aufgeklappte Einstellungen der Cursor-Zentrierung

- **Wartezeit vor Zentrierung:** Wie lange ohne Eingabe gewartet wird (Standard 5 Sekunden).
- **Countdown-Dauer:** Vorwarnung, bevor der Zeiger springt – jede Bewegung oder Taste bricht ab.
- **Taste zum manuellen Zentrieren:** Zentriert sofort auf Tastendruck.
- **Symbol am Mauszeiger anzeigen:** Zeigt ein kleines Zielsymbol.

7. Tastatur-Modul

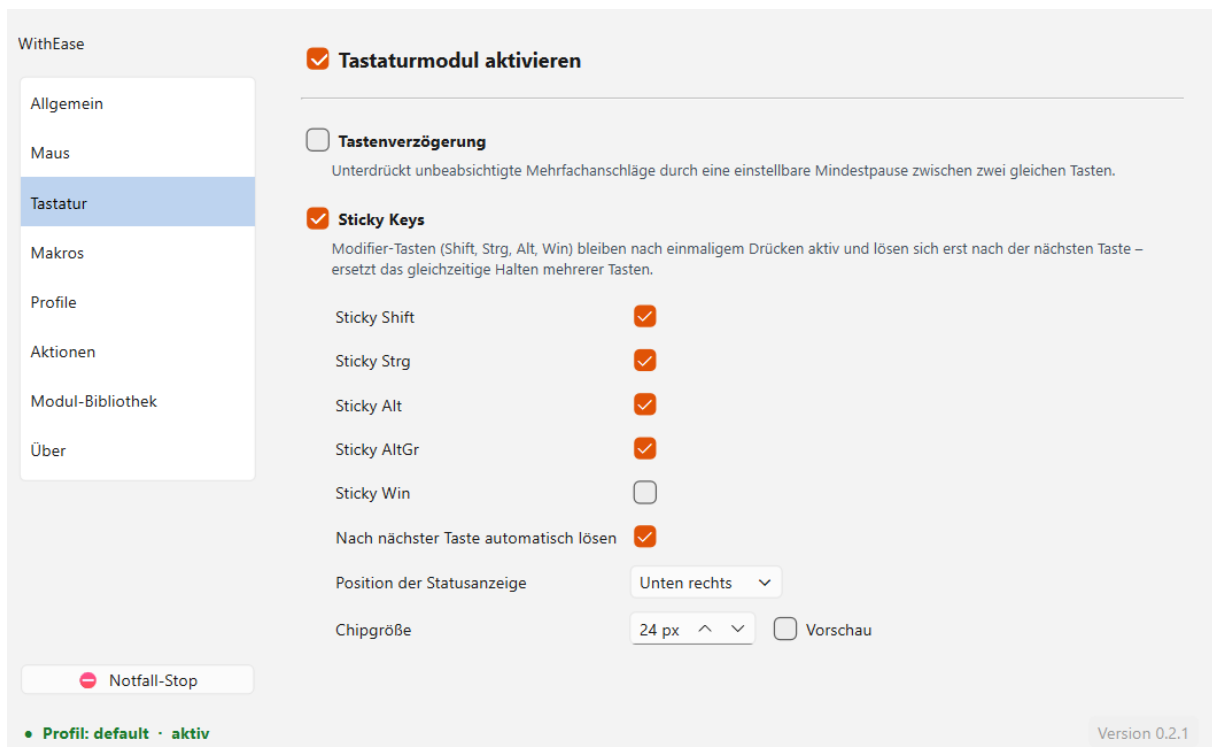

Das Tastatur-Modul mit Sticky Keys

Tastenverzögerung

Unterdrückt unbeabsichtigte **Mehrfachanschläge**: Nach einem Tastendruck wird dieselbe Taste für eine einstellbare Zeit ignoriert (z. B. 500 ms). Einzelne Tasten können Sie als Ausnahme eintragen.

Sticky Keys

Damit müssen Sie **keine zwei Tasten gleichzeitig** halten. Sie **tippden Modifier kurz an** (Umschalt, Strg, Alt, AltGr oder Win) – er bleibt vorgemerkt und gilt für die **nächste Taste**, danach löst er sich automatisch wieder.

- Beispiel: **Umschalt** antippen, dann **a** → ergibt **A**.
- Beispiel: **AltGr** antippen, dann **Q** → ergibt **@**.
- Nochmal antippen löst einen vorgemerkten Modifier wieder.
- Normales Halten (z. B. Umschalt+A) funktioniert weiterhin ganz normal.

Statusanzeige

Aktivieren Sie **Modifier-Status anzeigen**, dann sehen Sie am Bildschirmrand jederzeit, welche Tasten gerade vorgemerkt sind. Position und Größe sind einstellbar.

8. Makros


Mit Makros fügen Sie auf Tastendruck **Textbausteine** ein, senden Tastenkombinationen oder starten Programme.

So funktioniert der Makromodus

- Sie drücken die **Auslösetaste** (z. B. F9) → der Makromodus wird aktiv (eine Anzeige erscheint).
- Sie drücken die **Makro-Taste** (z. B. Num 1).
- Die Aktion wird ausgeführt, der Makromodus endet automatisch.

Ein Makro anlegen

Gehen Sie auf **Makros** → **Makro hinzufügen**. Vergeben Sie einen Namen, zeichnen Sie die **Taste** auf und wählen Sie den Typ.

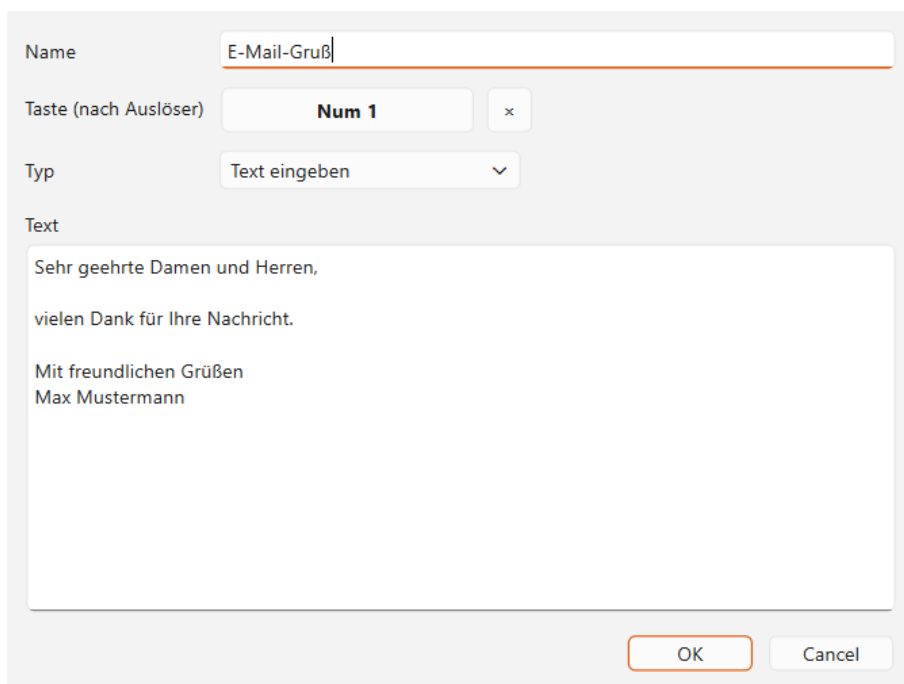

Ein Textbaustein-Makro: mehrzeiliger Text für eine E-Mail

Die Makro-Typen


- **Text eingeben:** Fügt einen beliebigen Text ein – auch **mehrzeilig**, z. B. eine komplette E-Mail-Vorlage oder Ihre Signatur.
- **Tastenkombination senden:** z. B. Strg+C.
- **Programm starten:** Startet eine Anwendung oder ein Skript.
- **Ablauf (Maus & Tastatur):** Mehrere Schritte nacheinander – Klicks, Texte, Tasten, Wartezeiten, Fenster in den Vordergrund.

Hinweis zum Textbaustein

Der Text wird über die **Zwischenablage** eingefügt (wie Strg+V). Das ist zuverlässig und behält Umlaute und Zeilenumbrüche bei. Ihre vorherige Zwischenablage wird danach wiederhergestellt. In Chat-Feldern kann ein Zeilenumbruch die Nachricht absenden – dort besser einzeilige Bausteine nutzen.

9. Profile

Profile speichern **alle Modul-Einstellungen getrennt** – praktisch, wenn mehrere Personen denselben PC nutzen oder Sie je nach Situation unterschiedliche Hilfen brauchen (z. B. Arbeit, Spielen, Gast).

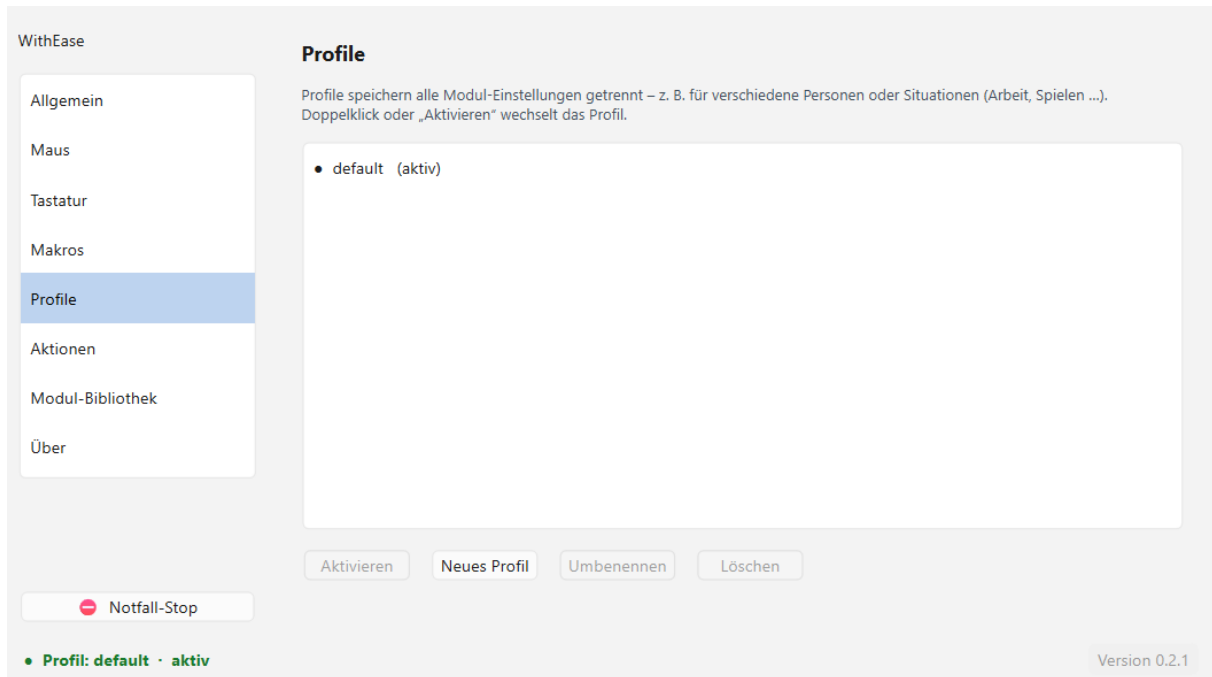

Profilverwaltung

- **Neues Profil** anlegen, **Umbenennen**, **Löschen**
- **Doppelklick** oder **Aktivieren** wechselt das Profil
- Schnell umschalten geht auch über das **Tray-Menü**

10. Aktionen & Favoriten-Overlay

Auf der Seite **Aktionen** sehen Sie alle Funktionen und Makros mit ihren Tastenkürzeln auf einen Blick. WithEase hat keine fest verdrahteten Tastenkürzel – Sie können jeder Aktion einen beliebigen Auslöser zuweisen.

WithEase

Aktionsmanager

Alle Aktionen und Makros mit ihren Hotkeys auf einen Blick. Mit dem Stern markierst du Favoriten – diese erscheinen im Overlay am Bildschirmrand.

Suchen ... (Aktion oder Tastenkürzel)

★	Aktion	Auslöser
☐	Notfall-Stop	F12

Favoriten stehen oben – Reihenfolge mit ▲▼ ändern (gilt auch fürs Overlay).

☐ **Favoriten-Overlay**

Zeigt deine Favoriten dauerhaft am Bildschirmrand – so hast du deine wichtigsten Hotkeys immer im Blick. Das Overlay lässt sich mit der Maus frei verschieben.

Notfall-Stop

• Profil: default · aktiv


Version 0.2.1

Übersicht aller Aktionen und Tastenkürzel

- Mit dem **Stern** markieren Sie Favoriten.
- Favoriten erscheinen im **Overlay** dauerhaft am Bildschirmrand – so haben Sie Ihre wichtigsten Tasten immer im Blick.
- Das Overlay lässt sich mit der Maus frei verschieben; Schriftgröße und Position sind einstellbar.

11. Modul-Bibliothek

Hier erweitern Sie WithEase um zusätzliche Module. Alle gezeigten Module stammen direkt von WithEase und sind geprüft. Ein Klick auf **Installieren** genügt – nach einem Neustart ist das Modul einsatzbereit.

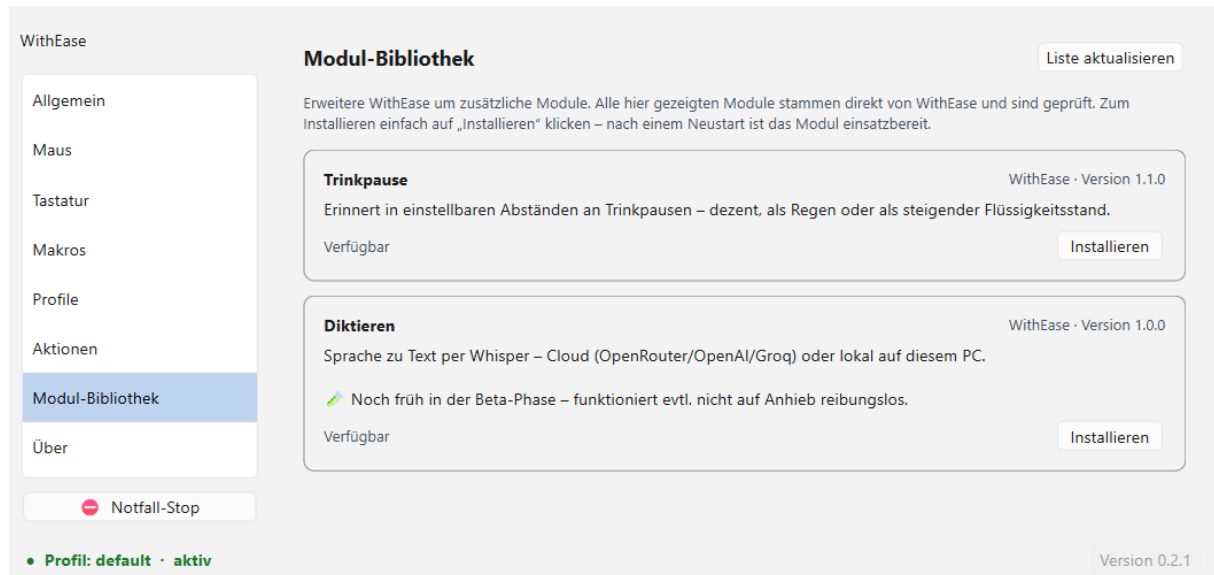


Die Modul-Bibliothek (kostenlos)

- **Trinkpause:** erinnert in einstellbaren Abständen ans Trinken – dezent als Hinweis oder als Regen-Overlay.
- **Diktieren:** Sprache zu Text per Whisper (Cloud oder lokal).

Diktieren ist noch Beta

Das Diktier-Modul steckt noch früh in der Beta-Phase und funktioniert nicht unbedingt auf Anhieb reibungslos. Rückmeldungen sind sehr willkommen!

12. Über, Feedback & Teilen

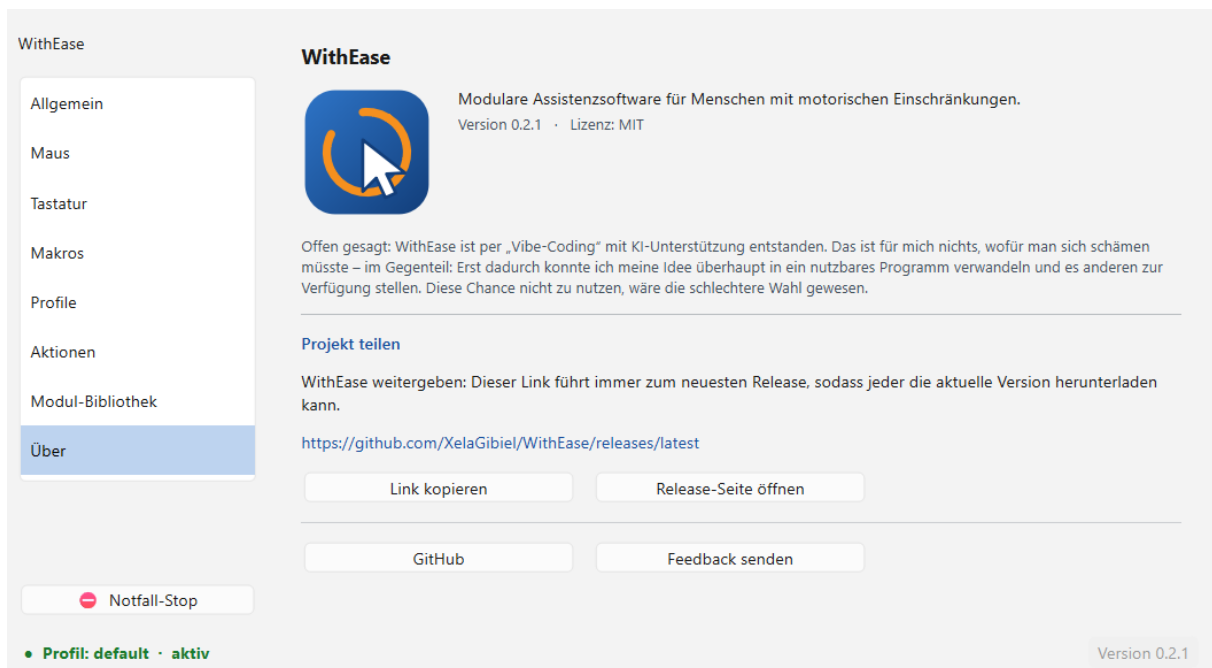

Die Über-Seite mit Feedback- und Teilen-Funktion

- **Feedback senden:** Schreiben Sie direkt aus dem Programm heraus – kein E-Mail-Programm nötig. Version und Betriebssystem werden automatisch mitgeschickt.
- **Link kopieren / Release-Seite öffnen:** Der Link führt immer zur neuesten Version – ideal zum Weitergeben.
- **GitHub:** Quellcode, Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge.

13. Tipps & Problemlösung

Eine Taste hängt oder alles verhält sich seltsam

Drücken Sie die **Notfall-Stop-Taste** (Standard F12). Sie gibt hängende Tasten frei und schaltet alle Hilfen ab. Erneut drücken schaltet sie wieder ein.

Windows warnt beim Start vor dem Programm

Das liegt an der fehlenden (kostenpflichtigen) Signatur, nicht an einem Problem mit der Datei:

Weitere Informationen → **Trotzdem ausführen**.

Ich sehe das Tray-Symbol nicht

Klicken Sie unten rechts auf den kleinen Pfeil „^“. In den Windows-Einstellungen können Sie das Symbol dauerhaft einblenden.

Der Textbaustein fügt nichts ein

Prüfen Sie, ob das Eingabefeld **Einfügen (Strg+V)** erlaubt. In seltenen Fällen hilft es, das Makro erneut auszulösen.

Sticky AltGr funktioniert nicht

Setzen Sie in **Tastatur** → **Sticky Keys** das Häkchen bei **Sticky AltGr** – jeder Modifier wird einzeln aktiviert.

Linux: Tasten werden nicht erkannt

Nutzen Sie eine **X11/Xorg**-Sitzung. Unter Wayland sperrt das System die globale Tastaturerkennung.

14. Hilfe & Kontakt

Sie haben einen Fehler gefunden, einen Wunsch oder eine Frage? Rückmeldungen sind ausdrücklich erwünscht – sie machen WithEase besser.

- Am einfachsten: **Über** → **Feedback senden** direkt im Programm.
- Oder auf GitHub: github.com/XelaGibiel/WithEase

Jede Rückmeldung hilft

Egal ob Fehler, Wunsch oder eine Idee, die Ihnen den Alltag erleichtern würde – schreiben Sie mir gern. WithEase lebt davon, dass Betroffene sagen, was sie wirklich brauchen.